

# alsa®

一般的な外科手術や  
処置等に幅広く対応できる  
ベーシックモデル



## パルスモード

高周波電流をパルス状(断続的)に出力させることで組織に対する不要な熱効果を低減する新技術「パルスモード」を搭載しています。この特徴的な出力波形により繊細な出力効果を実現し、有害とされる組織炭化や煙の発生を最小化します。

## 出力モード

CUT		COAG	
<b>PURE</b> (切開)	凝固作用のないカットモードで素早い切開に適します。	<b>MICRO</b> (深層凝固)	表層凝固よりも深部から凝固することができます。
<b>P PULSED</b> (切開パルス)	PUREモードの電流をパルス状に出力させるので、より繊細な切開に適します。	<b>M PULSED</b> (深層凝固パルス)	MICROモードの出力時間を0.1~1秒に設定が可能です。
<b>BLEND</b> (混合切開)	切開と凝固の混合電流により、凝固させながら切開することができます。	<b>FULG</b> (表層凝固)	表層を凝固させたい場合に適します。
<b>B PULSED 1</b> (混合切開パルス1)	BLENDモードの電流をパルス状に出力させるので、より繊細な混合切開が可能です。	<b>F PULSED</b> (表層凝固パルス)	FULGモードよりも繊細な凝固に適しています。
<b>B PULSED 2</b> (混合切開パルス2)	B PULSED 1モードよりもパルス幅が広く、より低侵襲な混合切開ができます。ポリープ切除に適したモードです。	<b>BIPOLAR</b> (バイポーラ凝固)	ピンポイントでデリケートな凝固が可能です。

アルザADC160パルス プライマリーセット

品番 ADC160-PS

通常価格 ¥470,000

SALE 価格 ¥423,000

その他のセット4種もセール対象です。詳しいセット内容は総合カタログ / パンフレット / E-SHOPにてご確認ください。

デモ器のご用意がございます。当社営業担当までご相談ください。

表示価格は税抜です。

導入支援

ALL  
10%  
OFF

# SALE

2022.1.7.fri ▶ 3.31.thu

kirikan®

kirikan®

株式会社キリカン洋行  
東京都港区港南5-4-12-7F

☎ 03-6718-4300

FAX 03-6718-4324  
URL www.kirikan.com




Fixin ロッキングプレートシステムの特徴は、動物専用に開発された多種多様なプレート形状にあります。骨折、骨切変形矯正、手根足根関節固定など、幅広い症例に対応します。



ロッキング機構

プレートのスクリーホールに取り付けられたプッシングにスクリーヘッドをはめ込むことでテーパロックさせます。この機構によりネジ噛みのリスクを回避し、更に荷重を分散させます。

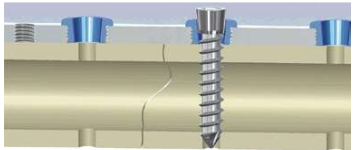

Micro

プレート厚：1.2~1.5mm  
スクリー径：1.3mm / 1.7mm  
適応：おおむね4kgまでの小型犬・猫

Mini

プレート厚：1.2~2.5mm  
スクリー径：2.0mm / 2.5mm  
適応：おおむね4~15kgまでの小型犬・猫

Large

プレート厚：1.5~3.0mm  
スクリー径：3.0mm / 3.6mm / 3.9mm  
適応：おおむね15~60kgまでの中型犬・大型犬

※適応体重は目安です。症例や術式により異なります。

## Fixin micro 器具セット

品番 FXN-SET1M

セット内容

- micro ドリルガイド Φ1.3mm用
- micro スクリュードライバー先端のみ(2本入)
- ドリルビット Φ1.3mm
- micro プッシングキャリア(2個)

※Φ1.7mmスクリーに対応します。Φ1.3mmスクリーには下記追加器具セットも必要です。  
※スクリュードライバーのハンドルはセットに含まれません。デンタルカップリングのハンドルが必要になります。

通常価格 ¥48,000

SALE 価格 ¥43,200



## Fixin micro 追加器具セット


品番 FXN-SET3

セット内容

- micro ドリルガイド Φ1.0mm用
- micro ディプスゲージ
- ドリルビット Φ1.0mm

通常価格 ¥55,000

SALE 価格 ¥49,500

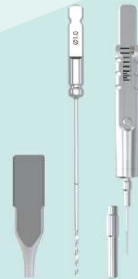

## Fixin mini 器具セット

品番 FXN-SET2M

セット内容

- mini ドリルガイド Φ1.5mm用
- mini ドリルガイド Φ2.0mm用
- ドリルビット Φ1.5mm
- ドリルビット Φ2.0mm
- mini スクリュードライバー
- mini プッシングキャリア / エクストラクター

通常価格 ¥48,000

SALE 価格 ¥43,200



※Largeシステムは器具セットのご用意がございません。単品でのご注文が可能です(セール対象外です)。詳しくはFixinカタログ / E-SHOPにてご確認ください。

## 整形外科器具 基本セット (Φ1.5/2.0mmスクリー用)

品番 OISET-1

これから整形を始められる先生にお勧めの小型犬向けの基本の器具セットです。

セット内容

- ドリルビット(クイックカップリング) Φ1.1mm
- ドリルビット(クイックカップリング) Φ1.5mm
- ドリルガイド 1.1/1.5mm径ドリルビット用
- ディプスゲージ 1.5~2.0mm径スクリー用
- タップ(デンタルカップリング) 1.5mm径スクリー用
- タップ(デンタルカップリング) 2.0mm径スクリー用
- クイックカップリングハンドル
- スクリュードライバー先 (デンタルカップリング)
- デンタルカップリングハンドル
- スクリュー把持鉗子
- ポイント骨鉗子
- ドゥーレン骨鉗子
- ラレイ骨鉗子
- プレートベンダー 小(1対)
- ホーマンレトラクター プレード幅4mm
- フレア骨膜剥離子
- 滅菌コンテナ(底穴あり) 内寸高さ6cm※  
※内寸高さ9cmに変更可能です。

滅菌コンテナの蓋の色をお選びいただけます。



※上記カラーはイメージです。  
また、色調には若干の個体差が生じる場合がございます。

通常価格 ¥358,000

SALE 価格 ¥322,200

